

アレルゲンキャッチフィルター Anti-allergen filter

アウトドアでの長時間の連続使用に最適


Can be worn continuously when spending long periods of time outdoors.

- ・花粉やダニなどのアレル物質を吸着し、変性。
- ・通気性に優れ、長時間使用しても息苦しさを感じません。
- ・顔にフィットして快適な立体構造。
- ・消臭機能で連続使用してもにおいが気になりません。
- ・丸洗いで再利用することができる。

*フィルターを洗う際は中性洗剤を使用し手洗いしてください。

また、風邪やウイルス対策として使用される場合は再利用しないでください。

- ・ Blocks and breaks up allergens, such as pollen and mites. • Superior breathability even when worn for long periods of time. • Articulated to fit comfortably on the face. • Deodorizing effect helps reduce odors even when worn for long periods of time. • Reusable after washing. • Hand wash filter using a mild soap. • Do NOT reuse filter if using to prevent colds and viruses.

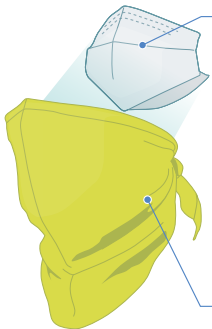

フィールドマスク(本体) Field Mask

抜群の通気性と速乾性を持つ機能素材を採用

Utilizes a quick drying material with superior breathability.

- ・ ウィックロン[®] クール[®]の採用により長時間使用しても息苦しさを感じません。・汗を素早く吸収し、速乾性にも優れています。・紫外線も遮断するのでアウトドアに最適です。


- Uses Wickron[®] COOL for super breathability even when worn for long periods of time. • Optimal for wicking moisture and quick-drying. • Blocks UV rays making it great for outdoor use.



フィルターを交換する際は別売の「フィールドマスク 交換用 (#1124403)」をご利用ください。

Replacement Filter Mask (#1124403) available when replacing filter.

使用方法 Directions

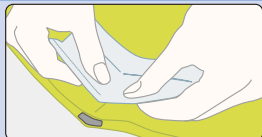

- ① フィルターの剥離紙をはがし、マスク内側の黒い部分に接着します。

① Peel off the filter's release paper and stick it to the black spot on the inside of the mask.



- ② 鼻を覆うようにして、後頭部で結びます。

② Cover your nose and tie it at the back of your head.



- ③ マスク上部のフィットワイヤーを調節し、鼻の形状に合わせます。

③ Adjust the wire at the top of the mask to align the shape of your nose.

注意事項 CAUTION! ・本製品は有害な粉塵やガス等の発生する場所での使用はできません。・万一、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合、ただちにご使用をやめ、医師にご相談ください。・火気のそばでのご使用はおやめください。・フィールドマスク上部にフィットワイヤーが付いていますので、取り扱いにはご注意ください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・ご使用方法により捕集性能が異なりますので、顔とマスクの間に隙間ができないようにしてご使用ください。・製造工程上、フィルターには色ムラや色違いの繊維が混入していることがあります。・品質上問題ありません。・この商品は病気の予防を保証するものではありません。適宜、手洗いやうがいによる予防措置をお心がけてください。

・ Do NOT use this product in areas where harmful particles or gases are found. • If itching, rash, or other symptoms develop, stop using and consult a physician. • Do NOT use near fire. • During use, be careful of wire located at top of field mask. • Keep out of the reach of children. • For the best results, eliminate gaps between face and mask. • Due to manufacturing process, filter color may vary. Color variation has no effect on product performance. • This product does NOT completely eliminate the risk of illnesses. To further reduce the risk of illness, additional measures are recommended, such as hand washing and gargling.

枚数	1セット(本体・フィルター)
対象	風邪・花粉・ウイルスを含む飛沫
素材	本体: ポリエステル 不織布: ポリエステル、レーヨン
Included	1 set (Field mask / Filter)
Best use for	Colds, Pollen, Virus-infected droplets
Material	Field Mask: Polyester Nonwoven fabric: Polyester & Rayon

フィルター: MADE IN JAPAN
表生地: 本体に記載
Filter: MADE IN JAPAN
Outer fabric: Description written on the product

株式会社 **モンベル** mont-bell Co., Ltd.

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN

お問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール 0088-22-0031

ウェブサイト <http://www.montbell.com>

